



پمپ پرستالتیک سینا

جریان پایدار، دقت بالا، و حفظ بهداشت در آزمایشگاه و کارخانه

معرفی و ویژگی پمپ های پرستالتیک سینا

پمپ های پرستالتیک، پمپ های با فشار مثبت برای جابجایی سیال های مختلف و انتقال محیط کشت، بافرها و سایر محلول ها بسیار ایده آل می باشند. سیال از داخل شلنگ سیلیکون انعطاف پذیر به واسطه فشردن مابین غلتک های هد پمپ و بدنه آن، عبور می کند و به دلیل این که سیال فقط با شلنگ در تماس می باشد، ریسک آلودگی کاملاً از بین می رود. پمپ های پرستالتیک عموماً برای پمپاژ سیالات تمیز و استریل و یا سیالات خورنده استفاده می شوند چرا که ورود آلودگی در این پمپ ها اتفاق نمی افتد.

- طراحی سبک و کوچک
- دقیق و قابل اطمینان
- دسترسی آسان به هد پمپ
- امکان تعویض جهت جریان پمپاژ
- امکان تعویض آسان و سریع شیلنگ
- عدم نیاز به سرویس و نگهداری های دوره ای
- امکان استفاده از این پمپ در همه مکان ها و جابجایی آسان آن
- تبدیل سریع پمپ تک کاناله به چند کاناله فقط با تعویض آسان هد پمپ



مزایا دستگاه

از مزایای این دستگاه می توان به نصب و راه اندازی آسان، هزینه پایین تعمیر و نگهداری، امکان تعویض شلنگ، سازگاری عالی با انواع سیالات اشاره کرد. این دستگاه با جابجایی مایعات با دقت بالا و نواخت یکسان در زمان طولانی، کاربردهای گسترده‌ای در پژوهشگاه های سلولی و مولکولی، آزمایشگاه های تشخیص طبی، بیمارستان ها و دیگر مراکز مرتبط و همچنین امکان استفاده در دیگر حوزه های صنعتی مانند داروسازی، شیمیایی، غذایی و پتروشیمی را دارند.

1. انتقال بدون آلودگی و تغییر ماهیت:


مناسب برای انتقال سیالات خورنده، سیالات دارای ذرات ساینده، سیالات حساس به تنش برشی، سیالات ویسکوز و چسبنده

2. عدم نیاز به سرویس و نگهداری:

عدم نیاز به اجزای گران قیمت مانند شیر، دیافراگم و روتور و در نتیجه عدم نشتی، مسدود شدن و زنگ زدگی

3. کارکرد پیوسته:

مناسب برای کارکردهای پیوسته و طولانی

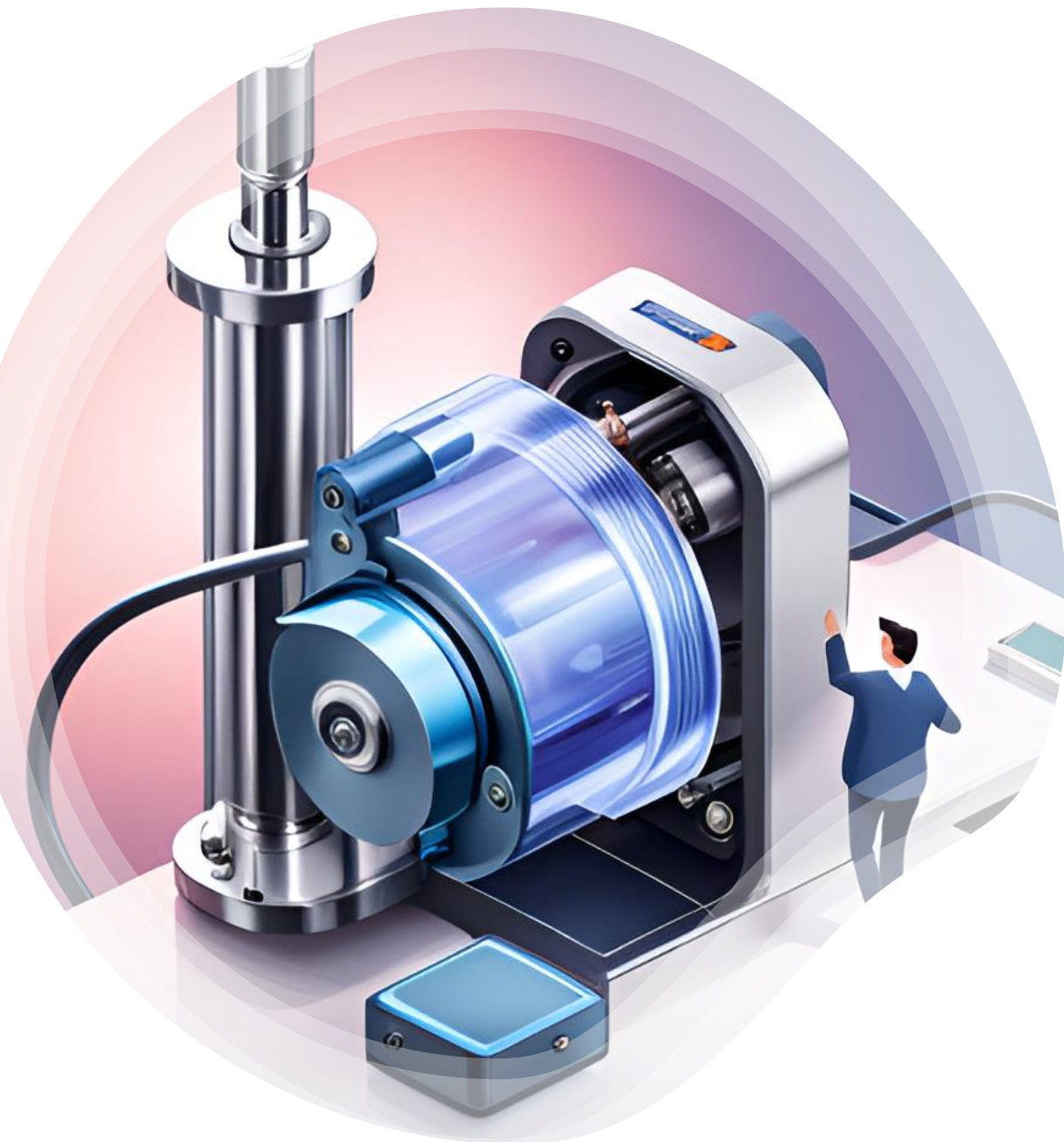

کاربرد

صنایع دارویی

صنایع نظامی

مراکز تحقیقاتی

صنایع آب و فاضلاب

صنایع غذایی و آشامیدنی

صنایع آرایشی و بهداشتی

صنایع نفت و پتروشیمی

سایر مراکز صنعتی



VP600	VP200	DG 6-8	SP15	SF15	مشخصات فنی پمپهای پرستالتیک سینا
1 - 500	1 - 400	1 - 200	1 - 200	1 - 150	محدوده سرعت (دور بر دقیقه)
100 - 10000	0.5 - 1500	0.05 - 60	0.1 - 150	0.05 - 120	محدوده جریان پمپاژ (میلی لیتر بر دقیقه)
3 – 3.3	1.4 – 1.6	0.8 - 1	0.8 - 1	1	ضخامت مناسب شیلنگ (میلیمتر)
9 - 14	3 - 8	1 – 1.5	2 - 5	1 - 3	محدوده سایز داخل شیلنگ (میلیمتر)
10	1.8	0.7	0.9	0.9	ماکزیمم فشار(بار)
مشخصات هد ها					
PETG	PETG	PETG	Polyamide	PETG	جنس
3	3	6	2	4	تعداد رول
SS 304	SS 304	SS 304	ABS	PETG	جنس رول
1	1	6 - 8	1	1	تعداد کانال
مشخصات الکتریکی و فیزیکی					
260 ×430×400	172 ×255×250	172 ×300×250	172 ×255×250	150 ×165×130	اندازه بدنه (W × D × H) (میلیمتر)
220V AC-6A	24V DC- 3A	24V DC- 3A	24V DC- 3A	12V DC- 2A	ولتاژ کار – جریان مصرفی
15	6	4	3	1.1	وزن (کیلوگرم)



VP600



SF15



VP200



DG8



SP15

شرکت دانش بنیان فرآیند پردیس سینا



تولید کننده تجهیزات تحقیقاتی و بیوتکنولوژی

تلفن: 021 - 44147824

ایمیل: info@faralab.com

www.faralab.com